


# フルティフォーム®120吸入用 カウンター表示と吸入残量の目安

フルティフォーム®は医師の指示に従い正しく使用してください。

- 吸入器の正面にはカウンターがあり、カウンター内の表示窓から吸入可能な残り噴霧数の目安を数字と色で確認できます。
- 初めて噴霧する場合、吸入器を体から離してよく振った後、4回空噴霧してください。正面に「120」が表示されます。

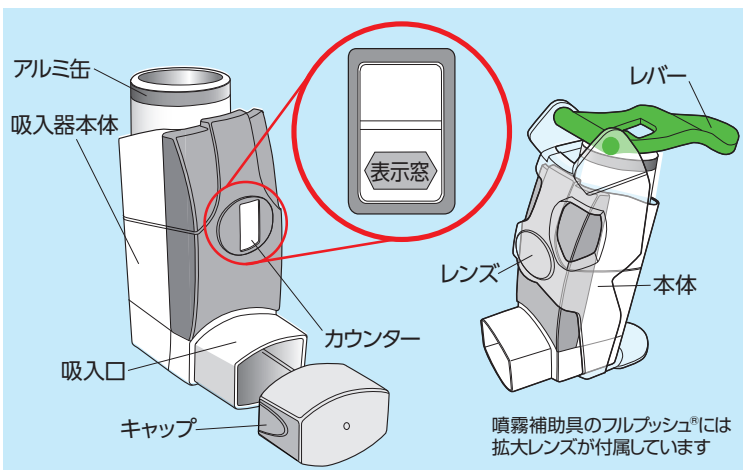

※使い始めた後3日以上使用しなかった場合は4回空噴霧して使用しますが、空噴霧した分残量は減ります。

- 吸入器のカウンターには吸入可能な残り噴霧数の目安が表示され、数字は「120,110,100,90,80,70,60,55,50,45,40,35,30,25,20,15,10,5,0」のみ表示されます。最初はカウンターの背景色が緑色で、使っていくうちに黄色、赤色へと変わります。

カウンターの内部イメージ **120・110・100・90・80・70・60・55・50・45・40・35・30・25・20・15・10・5・0**

- アルミ缶または補助具のレバーを押すとカウンターの数字が右から左に少しずつ動きます。



- 50から黄色が見え始め、40で黄色、30を過ぎると赤色が見え始め、20で赤になります。数字を表示する部分の表示窓は下から上に徐々に動きます。



- カウンターが完全に赤色になったら、残りは20吸入分です。なるべく早めに受診して、新しいフルティフォーム®を準備するようにしましょう。



**カウンターが「0」になったら、残った薬剤を使用しないでください。**