エクリラ®ジェヌエア®を お使いになる患者さんへ


エクリラ®は1回1吸入、1日2回のお薬です。

● 医師の指示どおりに毎日正しく使用してください。

ジェヌエア®（吸入器）について



・ボタンを押すと、1吸入分の薬剤がセットされ、信号が赤色から緑色に変わります。
・正しく吸入できると、「カチッ」という音がして、信号が緑色から赤色へ戻ります。
・吸入しないときは薬剤をセットしないでください。セットしてしまった場合、吸入口から薬剤がこぼれる可能性があるため、次の吸入まで注意してください。

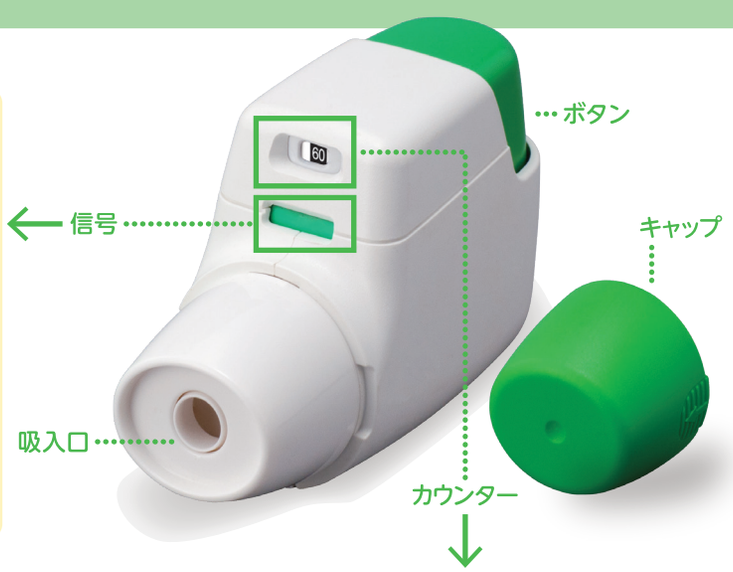


薬剤の残量を表示するカウンター（10回刻み）

30吸入用　30 20 10 0

60吸入用　60 50 40 30 20 10 0

ボタンを下までしっかりと押すごとに少しずつ左に動きます。

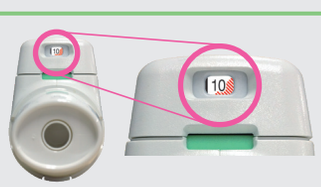

「赤色の線」が見え始めたら、再受診して新しいお薬を準備してください。



カウンターの中央に「0」が表示されると、ボタンがロックされ、最後1回分の吸入ができます。

取り扱い上の注意

- キャップを閉めて室温で保管してください。
- 強い衝撃を与えたり、分解したり、濡らさないように注意してください。
- お手入れする場合は、清潔な乾いた布やティッシュで拭いてください。
- 吸入器は、プラスチックと金属で作られています。
  使い終わった吸入器は、自治体により定められた方法に従って廃棄してください。

パソコン、スマートフォンなどから吸入方法の動画がご覧いただけます。

http://www.ek-kyunyu.jp



杏林製薬株式会社


改訂年月：2025.5
EK 0030
0000000KD

エクリラ®ジェヌエア®の吸入方法

Kyorin


吸入準備

キャップ両側の矢印部分を軽く押して引っ張り、外します。

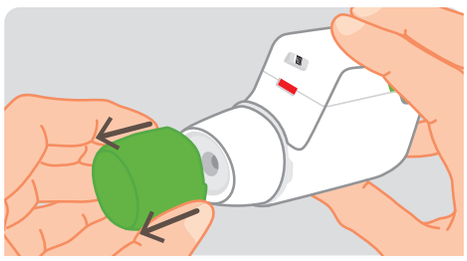

吸入前の状態

赤色

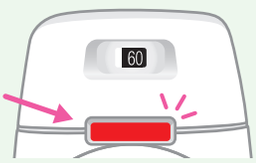

universal design expert favorite 2015

universal design consumer favorite 2015


エクリラ®の吸入器（ジェヌエア®）は「ユニバーサルデザイン賞2015」を2部門とも受賞しました。ユニバーサルデザイン賞とは文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することができる施設・製品・情報の設計へ贈られる国際的なデザイン賞です。


吸入方法

全ての操作は、ボタンを上にして吸入器を水平に持って行いましょう。

ステップ1 ボタンを押して離す

① ボタンを下までしっかりと押して離します。

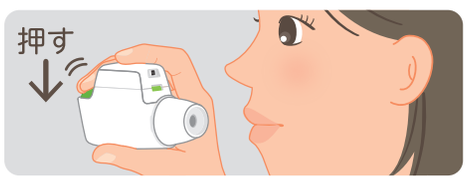

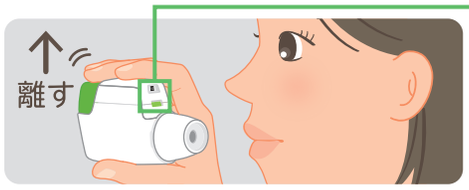

吸入準備ができた状態

緑色



薬剤がセットされています。

⚠注意

薬剤がセットされていない状態


赤色



ボタンをもう一度押して離してください。


ステップ2 吸入する

② しっかり息を吐いてから、吸入口を軽くかんで唇で包むように深くくわえ、強く深く吸い込みます。

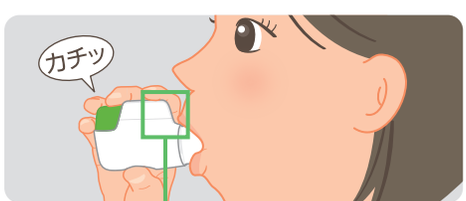

吸入できた状態

赤色

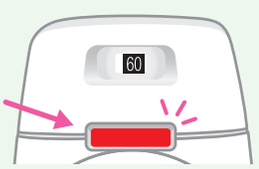

吸入時、「カチッ」と音が聞こえます。音が聞こえた後も最後まで息を吸いきってください。

⚠注意

吸入できていない状態

緑色



・強く、深く吸えていますか？
・ボタンを押したまま吸入していませんか？

ボタンを押さずに、もう一度吸入してください。

⚠注意



ボタンを押したまま吸入しないでください。

③ 吸入口から口を離し、3～5秒程度（苦しくない程度）息を止めてから、ゆっくりと息を吐きます。

吸入終了後

- 吸入が終わったら、キャップを付けて保管してください。
- 患者さんによっては甘みや苦みを感じる場合があります。のどや口の中に残った薬剤が気になる方はうがいをしてください。